


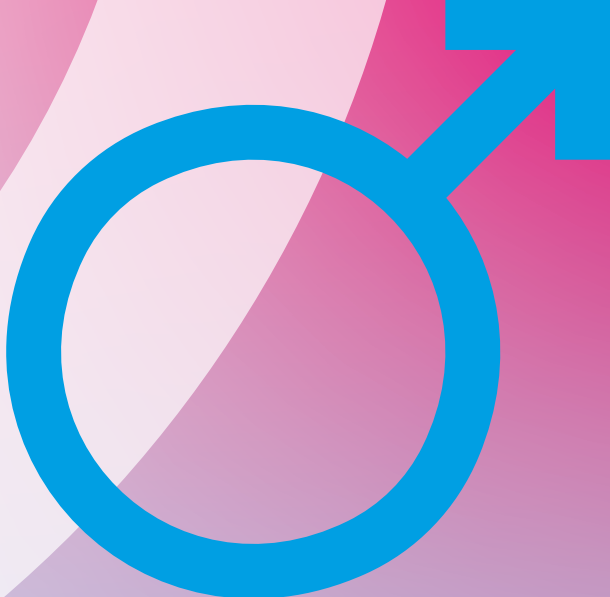

OVER DEZE TEST

Met dit afnamesysteem neem je een urine sample af, dat je vervolgens opstuurt naar het gecertificeerd laboratorium van Microbe&Lab voor testanalyse.

De analyse bepaalt of één of meerdere van de geteste SOA's aanwezig zijn in jouw sample. De SOA's kunnen vaak gepaard gaan met klachten zoals pijn en een branderig gevoel bij het plassen, afscheiding uit de urinebuis (vooral 's morgens), pijn in de balzak, ontstekingen bij de urinebuis, voorhuid en/of prostaat en/of overige ontstekingen in het lichaam.

Deze testkit is geschikt voor mannen die willen weten of ze positief testen op een SOA.

Als uit jouw testresultaat blijkt dat je SOA-positief bent is het belangrijk, dat jij en je (ex)bedpartner(s) getest en behandeld worden. Ook bij hen kunnen onbehandelde SOA's leiden tot o.a. onvruchtbaarheid, buitenbaarmoederlijke zwangerschappen en/of infecties aan de baarmoeder.

Bij een positief resultaat helpen wij je graag met de behandeling door het inzetten van onze BIG-geregistreerde artsen die samenwerken met Apotheek De Bosrand.

! Lees de bijsluiter eerst helemaal goed door voordat je de test gaat uitvoeren!

INHOUD VERPAKKING

! **Let op:** Controleer goed of alle hieronder getoonde onderdelen aanwezig zijn voordat je de test afneemt. Ondanks uitgebreide kwaliteits-controle kan het voorkomen, dat er een onderdeel ontbreekt. Neem in dat geval contact met ons op via hulp@ikwilvanmijnsoaaf.nl



A Urine pipet
Gebruik de pipet om urine op te nemen en in de urine opvangbuis te plaatsen.



B Urine opvangbuis
Plaats via de urine pipet jouw urine in de buis en sluit goed af.



C Codekaart
Bewaar de codekaart met jouw **unieke code** goed! Deze is noodzakelijk om je uitslag online op te vragen. **Zonder code geen uitslag!**



D Absorptiezakje
Plaats hierin de urine opvangbuis.



E Safetybag
Plaats het sample materiaal in het zakje, vervolgens in de retourbox.



F Portvrije retourbox
Voorzie de box van de afname datum en sluit af met de sluitsticker, beide aanwezig op de codekaart.

Voor deze test geldt: Buiten het bereik van kinderen houden. Droog en op kamertemperatuur bewaren. Alle onderdelen zijn voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Niet gebruiken bij beschadigde inhoud.

GEBRUIKSAANWIJZING

Stappenplan afname en opsturen sample

STAP 1
Plas bij voorkeur 's ochtends na het opstaan (minimaal 2 uur niet geplast) in een glas/beker. Het is daarbij heel belangrijk, dat je een kleine hoeveelheid (15-20 ml) eerste straal urine opvangt in het glas.

STAP 2
Pak de bijgesloten **urine pipet** **A** en zuig hiermee circa 1,25 ml van de urine uit het glas. Plaats met de **urine pipet** de opgezogen urine in de bijgesloten **urine opvangbuis** **B** en sluit deze goed af.

STAP 3
Plaats de **urine opvangbuis** in het **absorptiezakje** **D** en steek deze in de **safetybag** **E**. Haal de witte foliestrip van de plakrand en plak de **safetybag** goed dicht.

STAP 4
Plaats de **safetybag** in de **portvrije retourbox** **F**. Schrijf je afnamedatum op de daarvoor bestemde sticker op de **codekaart** en plak deze aan de binnenkant van je **portvrije retourbox**.

STAP 5
Sluit de portvrije retourbox goed en plak hem vervolgens dicht met de sluitsticker die op de codekaart zit. De portvrije retourbox heeft al een retouradres met antwoordnummer. Je hoeft geen postzegels te plakken. Verzenden bij voorkeur op zondag t/m vrijdag (vóór de lichte van 17:00 uur).

Nu is je sample klaar voor gratis verzending via een PostNL brievenbus.

INCUBATIETIJD		
Chlamydia, Gonorrroe, Mycoplasma		7-14 dagen
Trichomonas.....		21 dagen
Syfilis, HIV.....		4 weken
Hepatitis B/C.....		8 weken
HPV		enkele maanden/jaren

Let op! Bewaar de **codekaart** **C** met de unieke code goed. Deze code is noodzakelijk om je uitslag online op te vragen.

JOUW UITSLAG OPVRAGEN

Zodra jouw sample bij ons laboratorium is aangekomen, wordt het dezelfde dag verwerkt. Op werkdagen kun je jouw uitslag vanaf 18:00 uur online bekijken.


Ga naar ikwilvanmijnsoaaf.nl en klik op "Mijn uitslag". Vul de unieke code in die op je codekaart staat en download je uitslagenrapport.

Zie je de melding "Sorry, er zijn geen resultaten gevonden"? Dat betekent dat jouw sample **nog niet** bij het laboratorium is aangekomen. Wacht even af, de uitslag komt vanzelf beschikbaar zodra je sample verwerkt is.

Neem – bij aanhoudende klachten – altijd contact op met je huisarts. Als jouw test nog niet is geanalyseerd, dan krijg je dit te zien, onderaan het formulier.

Heb je nog vragen? We helpen je uiteraard graag. Neem contact met ons op via hulp@ikwilvanmijnsoaaf.nl

! **BELANGRIJK:** Bewaar je unieke code goed! Maak er eventueel een foto van. **Zonder code geen uitslag!**

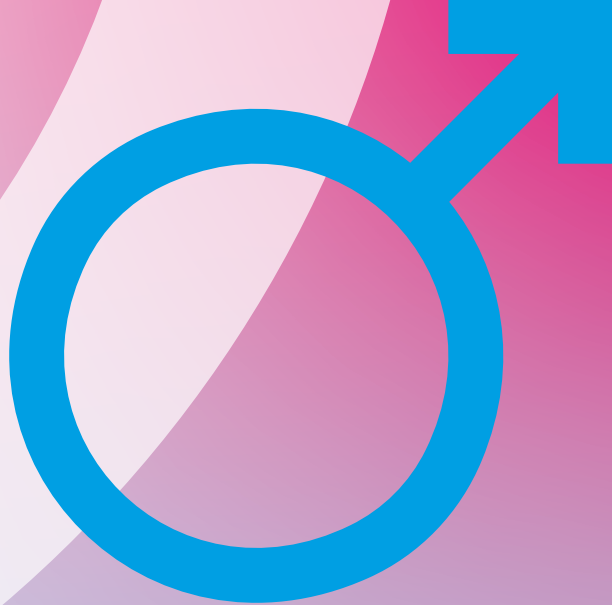

ABOUT THIS TEST

This kit is for you to take a urine sample, which is sent to the certified Microbe&Lab Laboratory for analysis.

The test determines whether the tested Sexually Transmitted Diseases (STD) are present in your sample. STDs are often accompanied by complaints such as pain and a burning sensation when urinating, discharge from the urethra (especially in the morning), pain in the scrotum, inflammation of the urethra, foreskin and/or prostate and/or other inflammations in the body.

This test is suitable for men who want to know if they test positive for STDs.

If your test result shows that you are STD positive, it is important that you and your (former) sexual partner or partners are tested and, in case of a positive test, treated. Untreated, STDs can lead to, among other things, infertility, ectopic pregnancies and/or infections of the uterus, this goes for you and/or your (former) sexual partner or partners.

In case of a positive result, we are happy to assist you with the treatment by engaging our BIG-registered doctors who collaborate with Apotheek De Bosrand.

! Read this leaflet completely prior to starting your test.

CONTENT OF PACKAGING

! **PLEASE NOTE:** carefully check if all items specified below are present before you take the test. Despite extensive quality control, it is possible that a part is missing. In that case, contact us via hulp@ikwilvanmijnsoaf.nl



A Urine pipette
Use the pipette to collect urine and place it in the urine collection tube.



B Urine collection tube
Place your urine into the tube via the urine pipette and close it tightly.



C Code card
Keep the **code card** with your unique code in a safe place! This is necessary to request your results online. **No results without code!**



D Absorption material
Place the urine collection tube in this.



E Safety bag
Place the sample material in the bag, then in the return box.



F Postage-paid return box
Label the box with the collection date and close it with the closing sticker, both present on the code card.

The following is applicable to this test: keep out of reach of children. Store it dry and at room temperature. All parts are for once-off use. Do not use it after the expiry date. Do not use if the content has been damaged.

INSTRUCTIONS FOR USE

Step-by-step plan to collect and send sample

STEP 1
Urinate in a glass, preferably in the morning after getting up (at least 2 hours without urinating). It is very important that you collect a small amount (15-20 ml) of the first stream of urine in the glass.

STEP 2
Take the enclosed **urine pipette** **A** and use it to suck approximately 1.25 ml of the urine out of the glass. Use the **urine pipette** to transfer the aspirated urine into the enclosed **urine collection tube** **B** and close it tightly.

STEP 3
Place the urine collection tube in the **absorption material** **D** and put it in the **safety bag** **E**. Remove the white foil strip from the adhesive edge and seal the bag tightly.

STEP 4
Place the **safety bag** in the **postage-paid return box** **F**. Write the sample date on the **code card** sticker and stick it on the inside of the box.

STEP 5
Close **the box** properly and use the sealing sticker from the **code card** to secure the box. The return address with a freepost number is already prepared for you, so no need to add any stamps. You can drop your sample at the nearest PostNL letterbox or post office.

INCUBATION PERIOD	
Chlamydia, Gonorrhoe, Mycoplasma	7-14 days
Trichomonas.....	21 days
Syphilis, HIV.....	4 weeks
Hepatitis B/C.....	8 weeks
HPV	several months/years

Attention! Keep the **code card** **C** with the unique code safe. The code is necessary to retrieve your results online.

REQUEST YOUR RESULTS

As soon as your sample arrives at our laboratory, it will be processed the same day. On weekdays, you can view your results online from 6:00 PM.

Go to ikwilvanmijnsoaf.nl and click on "Mijn uitslag". Enter the unique code on your code card and download your results report.

Do you see the message "Sorry, er zijn geen resultaten gevonden"? This means that your sample has not yet arrived at the laboratory. Please wait a bit, the result will be available as soon as your sample is processed.

Do you have any more questions?
We will gladly assist. Please contact: hulp@ikwilvanmijnsoaf.nl

! **Important!**
Keep your unique code safe!
Take a photo of it if necessary.
No results without code!

